



Общество с ограниченной ответственностью

«Биолабмикс»

ИНН 5408278957 КПП 540801001

630090, Новосибирская обл., г. Новосибирск,

ул. Инженерная, дом № 28

Tel/Fax: +7(383)363-51-91, Tel: +7(383)363-22-40


E-mail: sales@biolabmix.ru

## Набор для введения флуоресцентной метки Су5 в 3' положение РНК

Кат. номер LBL-RNA-3-1, LBL-RNA-10-1

### Описание:

Набор предназначен для введения флуоресцентной метки Суанине 5 (Су5) по 3'-ОН группе молекулы РНК. Спектр поглощения и эмиссии флуоресцентного красителя Су5 представлен ниже на рисунке.

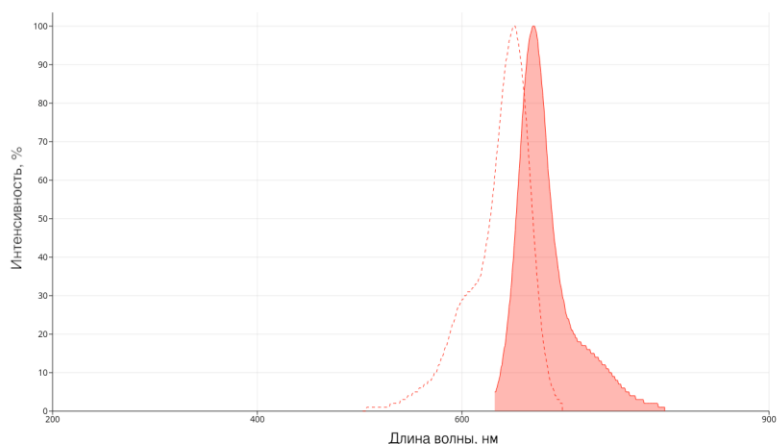

Тип	Пик, нм
Возбуждение	651
Излучение	670

### Состав набора:

	LBL-RNA-3-1 на 3 реакции	LBL-RNA-10-1 на 10 реакций
Раствор красителя Су5	15 мкл	50 мкл
Буфер для реакции окисления	100 мкл	200 мкл
Буфер для реакции с Су5	100 мкл	200 мкл
Окислитель	100 мг	300 мг
Буфер для осаждения	100 мкл	200 мкл
Вода, обработанная DEPC	2 x 1500 мкл	3 x 1500 мкл

## Реактивы и оборудование необходимые для работы

- центрифуга, способная достигать скорости не менее 16000 rcf;
- весы аналитические с точностью до 1 мг;
- полиэтиленовые микроцентрифужные пробирки объемом 0,5 – 2 мл;
- набор автоматических дозаторов;
- этиловый спирт, 96%.

## Перед началом работы

### Приготовление раствора окислителя:

- 1) На весах взять навеску 10 – 30 мг окислителя в пробирке объемом 1,5 мл.
- 2) Затем в пробирку к окислителю добавить воду, обработанную DEPC.

### Количество воды рассчитать по формуле:

$$\text{Объем воды (мл)} = \frac{\text{масса навески (мг)}}{85}$$

- 3) Перемешать содержимое пробирки до полного растворения кристаллов. Раствор окислителя рекомендуется хранить при **комнатной температуре** не более 7 дней с момента приготовления. При более низких температурах выпадает осадок (!).

Охладить 96% этиловый спирт до температуры от -19 °С до -25 °С.

### Приготовление 1000 мкл промывочного раствора:

В пробирку объемом 1,5 мл добавить 800 мкл 96% этилового спирта и 200 мкл воды, обработанной DEPC. Перемешать.

## Протокол (1 реакция)

### 1. Окисление РНК.

- 1) В пробирку вместимостью 0,5 – 1,5 мл добавить 10 мкл буфера для реакции окисления.
- 2) Добавить 1 – 20 мкл образца, содержащего 5 – 150 мкг РНК.
- 3) Добавить 5 мкл готового раствора окислителя.
- 4) Довести реакционную смесь водой, обработанной DEPC, до 50 мкл.
- 5) Перемешать содержимое пробирки и инкубировать в течение 1 ч в темном месте при комнатной температуре (20 – 30 °С).

### 2. Промежуточная очистка РНК.

- 1) В пробирку с окисленной РНК добавить 5 мкл буфера для осаждения и 150 мкл 96% этанола, предварительно охлажденного до -19 °С. Перемешать встряхиванием.
- 2) Инкубировать образец при температуре от -19 °С до -25 °С в течение 15-30 минут.
- 3) Центрифугировать образец в течение 20 – 30 мин при 16000 rcf и температуре 4 °С.

- 4) Аккуратно дозатором удалить из пробирки супернатант и внести 200 мкл промывочного раствора. Инкубировать образец с раствором в течение 0,5 – 1 минуты при комнатной температуре.
- 5) Удалить промывочный раствор. Оставить пробирку с осадком РНК с открытой крышкой в темном месте на 15 – 20 минут для высушивания.

### **3. Введение флуоресцентной метки в РНК.**

- 1) В пробирку с осадком РНК добавить 35 мкл воды, обработанной DEPC. Перемешать с помощью дозатора до полного растворения осадка.
- 2) Добавить 10 мкл буфера для реакции с Су5.
- 3) Добавить 5 мкл раствора красителя Су5.
- 4) Перемешать содержимое пробирки и инкубировать в течение **ночи** в темном месте при комнатной температуре (20 – 30 °С).

### **4. Очистка меченой Су5 РНК.**

Для очистки РНК от компонентов реакции с красителем выполнить **пункт 2** данного протокола.

После высушивания осадка добавить необходимое количество воды, обработанной DEPC, и перемешать. Далее измерить концентрацию РНК любым удобным способом.

**Примечание:** при применении набора для введения флуоресцентной метки в 100 мкг РНК будет получен препарат, содержащий 70 – 90 мкг РНК с содержанием меченой РНК 50 – 80%.

#### **Условия хранения**

Хранить при температуре -20 °С. Срок годности см. на упаковке.

#### **Условия транспортирования**

Транспортировку набора производить при температуре -20 °С (допускается транспортировка при 4 °С не более 3х суток).